

この製品について	準備する	測定する	必要なとき	
ご使用の流れ 3 安全上のご注意 4 正しいはかりかた 6 各部の名前/付属品 9	電池をセットする 10 地域と日時を設定する 10 個人データを登録する 12	乗るピタで測定する 15 前回の値を見る 19 目標体重設定 20 体重だけをはかる 21 登録番号を指定して測定する /ゲストモード 22	個人データを変更する 23 個人データを消去する 24 故障かな? 25 仕様 26	

取扱説明書 体組成計 BC-800

体組成計BC-800をお買い上げいただき、ありがとうございます。 毎日のカラダづくりにお役立てください。

お願い


本機は誤った使い方をしますと重大な事故につながるおそれがあります。この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。



ご使用の流れ

🐶 はかる前の準備

○電池をセットする (P.10)

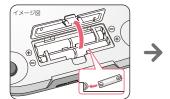

○地域と日時を設定する(P.10)



○個人データを登録する (P.12)

生年月日

身 長

パスワード(任意)

体組成

🔯 はかる

○乗るピタで測定する (P.15) 乗るピタとは、登録者の中から測定 者を認識し、結果を表示する機能 です。乗るだけで測定できるので、 毎日の測定が手間になりません。



- ○前回の値を見る (P.19)
- ○目標体重設定 (P.20)
- ○体重だけをはかる (P.21)
- ○ゲストモードではかる (P.22)

0

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明して います。本文をよくお読みいただき、本機を安全に正しくお使いください。

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容を示しています。

/ 注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性のある」内容を示しています。



してはいけない「禁止」内容を示しています。



「必ず守っていただく」内容を示しています。

↑ 警告



ペースメーカー等、体内機器装着者は絶対に使用しない

本機は、微弱な電流を体内に流しますので、医用電気機器 の誤作動による重大な事故の原因になります。



本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない

転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。



測定結果は、決して自己判断しない (測定値の評価、それに基づく運動メニュー等)

自己判断による減量や運動療法は健康を害する原因にな ります。必ず資格を持った専門家の指示に従ってください。



禁止

転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。 また、本機内部に水が侵入し故障の原因になります。

タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使わない

注意

表示部の上に乗らない

破損してけがをする可能性があります。

隙間や穴に指を入れない

けがをする可能性があります。



充電式の電池を使用しない

新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない

液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがな どの原因になります。

乳幼児には、絶対に持ち運びさせない

落として、けがをする可能性があります。

業務用(病院等での測定)には、絶対に使用しない

業務用として病院等で使用するための機能を備えておりま せんので、病院等では絶対に使用しないでください。

熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しない



汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し、 固く絞って、拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

必ず守る

分解や水洗いは絶対にしない

本機の損傷や故障の原因になります。

過度の衝撃や振動を与えない

本機の損傷や故障の原因になります。

以下の場所で本機を保管したり使用したりしない

本機の損傷や故障の原因になります。

- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の 風が直接当たる所
- ・ 温度変化の激しい場所、振動の激しい場所
- 混気の多い場所や水気のある所

体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない

介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。 (※手すり等を利用した場合、測定値は参考値として捉えて ください。)

必ず守る 電池を入れるときは、極性(⊕、⊖)の方向を間違わない

液漏れなどで、床等を汚損する可能性があります。 (長期間ご使用にならない場合は、電池を本機から取り外 してください。)

濡れた体で乗らない

体や足の水分を よく拭いて から測定してください。転倒 してけがをする可能性があります。また、正確な測定がで きません。

携帯電話や電子レンジなど電波を発する機器を本機の近 くで使用しない

誤作動して正確に測定できない可能性があります。

1

0


正しいはかりかた

◎ 測定場所

硬く、平らな安定したところでご使用ください。

- ●直射日光の当たる場所や暖房機具の近く、または空調機の風が 直接当たる所には置かない。
- ●温度変化の激しい場所での使用は避ける。
- ●湿気の多い場所や水気のある所には、置かない。
- ●携帯電話や電子レンジなど電波を発する機器を本機の近くで使 用しない。
- ●コルク床やクッションフロアーなどの軟らかい床でご使用になる と、精度の保証ができません。また凹みなどの跡が残る可能性が あります。
- ●で使用になる場所によっては、Mみなどの跡が残る可能性があり ます。


※ご使用前に目立たない場所(ご使用される場所の隅の方など)でご確認ください。

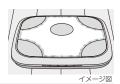



じゅうたんや、畳の上では ご使用できません

正しく測定できません

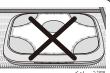

🐼 設置

本機は立てかけたり、上にものを置いた状態で保管した場合や、設 置場所から移動させて測定する場合でも、乗るピタで測定するこ とができます。(©T P.15)

日々の健康管理を持続させるために、体組成計を収納せず、いつ でも測定できるように置いておくことをおすすめします。


以下のような場所で保管しないでください 正常に機能しない場合があります




- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調 機の風が直接当たる所
- 必ず守る ・湿気の多い場所や水気のある所
 - 振動の激しい場所
 - ・ 温度変化の激しい場所

☞ 測定時間/条件

生活パターンの違いにより、体重やからだの電気抵抗が変動するため、測定値には個人ごとに違った変動があります。さらに、測定値は体内水分の変化や体温に大きく影響されるので、できるだけ同じ時間帯、同じ状態で測定し、細かい変化にとらわれず、長期的な変化傾向を見ることをおすすめします。

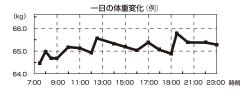

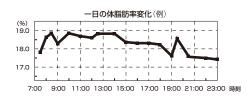

おすすめ測定時間

起床朝食

▶ 2時間後

おすすめ 測定時間

昼食

▶ 2時間後

おすすめ 測定時間 夕食 · 入浴 2時間後

おすすめ 測定時間

就寝

過度の飲食、極度の脱水症状のときは、測定を避ける

測定値に誤差が生じる可能性があります。精度を高めるには、起床直後を避け、食後2時間以上経過した同じ時間帯でで使用ください。

必ず守る

サウナや半身浴(長湯)、激しい運動をした後は、測定を避ける

測定値に誤差を生じる可能性があります。充分休んでから、測定してください。

体調の悪い場合(二日酔い、下痢、発熱などのとき)は、測定を避ける

測定値に誤差を生じる可能性があります。充分休んでから、測定してください。

正しいはかりかた(つづき)

◎ 測定姿勢

正確な測定のために、いつも正しい姿勢 を心がけてください。

つま先側とかかと側の電極に足が均等 にかかるように、素足で乗ってください。



イメージ図

※足がはみ出る場合は床に足がつかないように 乗ってください。

なるべく裸に近い状態で測定する

着衣のままで測定すると、着衣の重さが含まれます。

足の裏を、電極部に正しく合わせて、測定する

電極と足の裏の接触不良の場合、体脂肪率が低く表示されたり、 [Fccl(エラー)が表示される場合があります。

素足になり、足の裏の汚れを落としてから測定する

靴下などを履いていたり、足の裏にほこりなどがついていると、 正確に測定できません。

必ず守る 硬く平らな床の上に置いて測定する

じゅうたんや畳の上では正確に測定できません。

ヒザを曲げたり、座ったまま測定しない

正確に測定できません。

測定中は動かない

測定中に動くと、正確に測定できません。

足の内側(内もも)がつかないように測定する

内ももがついてしまう場合は、乾いたタオルなどをはさんで測定してください。

NOTE 測定結果について

以下に当てはまる方は、参考値として変化の推移をみられることをおすすめします。

- 体内に金属を装着されている方
- ・体水分の変化を誘発する薬(例:利尿剤など)を服用されている方
- ・妊娠中や、人工透析患者、またはむくみ症状の方 ※本機は、日本人の一般男女および、小学生以上の子供を対象にしています。上記のような方は、体脂肪率の信頼性が低下する可能性があります。
- ・かかとの表面(角質層)が固い状態の方は、正常な測定ができません。足の裏をしめらせてから測定してください。

各部の名前/付属品



操作部

Set ボタン

- ・設定を開始するときに使用します。
- 決定をするときに使用します。
- 前回の値をみるときに使用します。

Off ボタン

- 体重だけをはかるときに使用します。
- ・電源を切るときに使用します。

Diet ボタン

・目標体重を設定するときに使用します。



▼ ボタン

▲ ボタン

- ・登録内容を選択するときに使用します。・登録内容を選択するときに使用します。
- ・測定項目を切り替えるときに使用します。 ・登録番号やゲストモードを呼出すときに使用します。

付属品

▶取扱説明書 保証書付き (本書)




□お試し用電池 (単3形 (R6):4本)




0

この製品について 準備する 測定する 必要なとき

電池をセットする

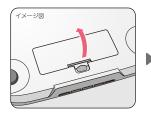

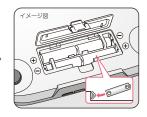


●電池が消耗してくると「Lo」が点灯します。速やかに新しい電池(4本全て)と交換してください。(精度の保証ができません)



この内容を守らないと、故障の原因になります。

- ●アルカリ電池とマンガン電池の併用は絶対にしない
- 禁止 ●充電式の電池は使用しない
- ●古い電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って処理してください。
- ●電池を交換したあとに自動的に電源が入ることがあります。その場合は、 本機を床上に置き、Offボタンを押してください。それでも消えない場合は、電池をはずして表示を消してから電池を入れ直してください。
- ●付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が 短くなっている場合があります。
- ●電池の寿命は約1年です。(1日に4回はかった場合)※ご使用条件により異なります。
- ●電池をはずすと、日時がリセットされます。再度設定してください。(©室 P.11)
- ●登録した個人データ(生年月日/性別/アスリート/身長/パスワード/ 体組成)、前回値および地域番号は電池をはずしても、内容は消えません。

地域と日時を設定する

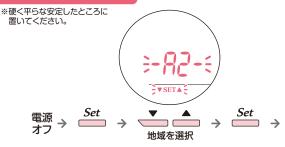



-A1-: 北海道

-A2-: 本州·四国·九州

-A3-:沖縄





10 電池を セットする 地域と日時を設定する

個人データを 登録する

電池を セットする 地域と日時を 設定する 個人データを 登録する 1 -

٠.

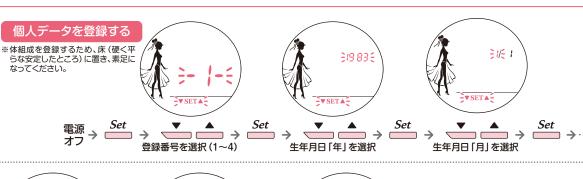

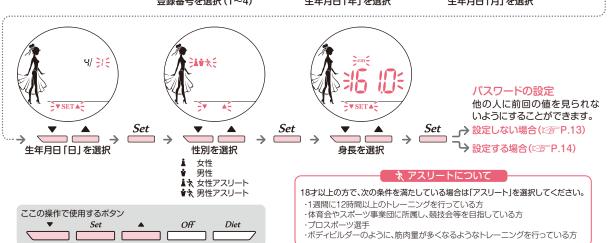


12 電池を セットする

地域と日時を設定する

個人データを 登録する



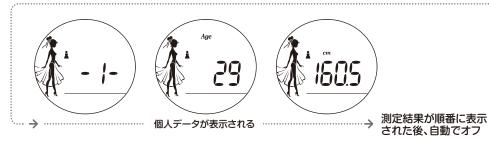

Diet

電池をセットする

ここの操作で使用するボタン

地域と日時を 設定する

Off

個人データを 登録する 3 -

参パスワードを設定する場合









「ツテラ」を選択



4ケタのパスワードを

※ Set を押した後は、QQkg表示前に 本機から手を離してください。

素足で乗る → ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ → ……

順次設定

イメージ図





個人データが表示される …………………… →

測定結果が順番に表示 された後、自動でオフ

※パスワードを設定した場合は、が表示されます。

ここの操作で使用するボタン Off Diet

パスワードについて

パスワードを変更したい場合は、個人データの変更を行ってください。 (© P.23)

パスワードを忘れた場合は、個人データの変更を行い再設定してください。

14 雷池を セットする

······ →


地域と日時を 設定する

個人データを 登録する

この製品について 準備する 測定する 必要なとき

乗るピタで測定する



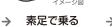







降りる ※降りてから3秒間は本機を動かしたり、 ボタンを押さないでください。

電源オフ





→ …………… 個人データが表示される ………… → 次のページへ

MOTE 誤認識だった場合

個人データまたは測定結果表示中に▲ボタンで登録番号を選択し、Set を押すと 選択した個人データと結果が表示されます。

<誤認識しやすい場合>

- ・体重、体型の近い人が測定したとき
- ・数日間測定せず、体重に変動があったとき
- 立てかけたり、持ち運んだり、本機の上に物を置いて保管した直後に測定したとき

※誤認識が続く場合は登録番号を指定して測定してください。(©TP.22)

自動補正機能

立てかけや上にものを乗せた状態などで収納した場合、測 定値に誤差を生じることがあります。新しい乗るピタでは、こ の誤差を自動補正する機能がついています。

乗るピタで測定後 降りる









個人データが表示され、各測定項目の表示が自動で切り替わる

乗るピタで 測定する

前回の値を 見る

日標体重

体重だけを



🧇 測定結果(自動でスクロール表示します)

▼:項目を切り替える

Set:前回の値を見る(☞ P.19)

NOTE 前回値からの増減

画面の中の矢印は、前回値からの増減を表しています。







体組成

カラダを構成する組成分で、脂肪・筋肉・骨・水分などがあります。 脂肪が多すぎる、筋肉が少なすぎる、などの体組成の乱れは、美容や体調の乱れにもつながります。 体組成を意識して食事や運動のバランスをとることで、外見だけでなく内側からもきれいなカラダづくりが行えます。

美脚度

※17才以下の方と男性は表示されません

美脚に重要な脚の筋肉がきちんとついているか、体重に占める脚の筋肉量などをもとに100点満点で表示します。脚に筋肉がついていると、脚が引き締まるだけでなく、むくみにくくなります。 ハイヒールを履きこなすにも筋肉は大事な要素です。 高角点を出すには、適切な体重で筋肉を付けることがポイントです。

一判定一

?????	レベル 5	96点~
🚭	レベル 4	91点~95点
+ 🚭 + +	レベル 3	81点~90点
*	レベル 2	71点~80点
	レベル 1	~70点

S-Fat (Subcutaneous Fat) 皮下脂肪率

※17才以下の方は表示されません

体内に占める皮下脂肪の割合です。皮 下脂肪は、内臓の隙間につく内臓脂肪 とは違い、皮膚の下につき、女性らしい 滑らかなボディラインを作る、皮膚に 潤いを与えるなど、きれいなカラダブ くりに重要な要素です。しかし、皮下 脂肪が多すぎると、ボディラインが崩 れてしまい、少なすぎると気温や衝撃 から身を守れなくなってしまいます。 適度な皮下脂肪率を目指しましょう。

一判定一

137-2			
Less	少ない		
Standard⊖	-標準		
Standard	標準		
Standard 🕀	+標準		
Much	多い		

Body Fat 体脂肪率

皮下脂肪や内臓脂肪など体内に占める脂肪組織の割合です。

体脂肪率が高すぎると、高血圧な どの生活習慣病の原因になり、低 すぎると女性ホルモンの分泌異常 が起こり月経がとまってしまうこ ともあります。適切な体脂肪率を 心がけましょう。

一判定一

Less	少ない
Standard⊖	-標準
Standard 🕀	+標準
⊖Much	軽肥満
Much	肥満

※皮下脂肪率·体脂肪率判定表(定置P.18)

この製品について 準備する 測定する 必要なとき







→ 自動でオフ

BMR (Basal Metabolic Rate) 基礎代謝量

※17才以下の方は表示されません

呼吸をする、心臓を動かすなどの 生命活動のために常に使ってい るエネルギーのことで、運動など も含めた1日の総消費エネルギー 量の約70%を占めます。基礎代 謝量を上げることで、脂肪を燃焼 しやすく太りにくいカラダにな ります。運動を行い筋肉量を増 やすことが基礎代謝を上げるポイントです。

一判定一

Less	少ない
Standard	標準
Much	多い

Body Age 体内年齢

※17才以下の方は表示されません

基礎代謝や体組成の年齢傾向から、 測定した体組成のデータがどの年 齢に近いか、体内年齢として表示し ます。

筋肉量が多く、基礎代謝量が高くなるほど、体内年齢は若くなります。 体内年齢に注目すると、楽しみなが らダイエットが続けられるかもし れません。

Weight 体 重

目標体重を設定することができます。(©〒 P.20)



0

この製品について 準備する 測定する 必要なとき

◎ 皮下脂肪率判定表

女性	10) %	20%	30%
18~24才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	5 16 17 18 19 20 21 22 23	3 24 25 26 27 28 29 30
25~29才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	5 16 17 18 19 <mark>20 21 22 2</mark> 3	24 25 26 27 28 29 30
30~34才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	5 16 17 18 19 20 21 22 23	3 24 25 26 27 28 29 30
35~39才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	5 16 17 18 19 20 21 22 23	3 24 25 26 27 28 29 30
40~49才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	5 16 17 18 19 20 21 22 2 3	3 24 25 26 27 28 29 30
50~59才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	5 16 17 18 19 20 21 <mark>22 23</mark>	3 24 25 26 27 28 29 30
60~69才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	5 16 17 18 19 20 21 22 <mark>23</mark>	3 24 25 26 27 28 29 30
70才~	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	5 16 17 18 19 20 21 22 <mark>23</mark>	3 24 25 26 27 28 29 30
男性		!		
18~24才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	5 16 17 18 19 20 21 22 23	3 24 25 26 27 28 29 30
25~29才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 18	5 16 17 18 19 20 21 22 23	3 24 25 26 27 28 29 30
30~34才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 18	i 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30
35~39才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	i 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30
40~49才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	i 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30
50~59才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	i 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30
60~69才	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 13	5 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30
70才~	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	i 16 17 18 19 20 21 22 23	3 24 25 26 27 28 29 30
Ì	少ない	■ −標準	標準	+標準 3い

●各年代の平均的な値と比較して「少ない/-標準(平均的の中で少なめ)/ 標準(平均的)/+標準(平均的の中で多め)/多い]を判定したものです。 ※数値は月安です。


© 2013 TANITA Corporation.

፟ 体脂肪率判定表

女性	10%	20%	30%	40%
6才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 <mark>29</mark> 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
7才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
8才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
9才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
10才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
11才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
12才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
13才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
14才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
15才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
16~17才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
18~39才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
40~59才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
60才~	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
男性				
6~7才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
8~11才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
12~13才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
14才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 <mark>29 30 31 32 33 34</mark> 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
15才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
16才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
17才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
18~39才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
40~59才	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
60才~	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
		_ †#	一標準	軽肥満 肥満

※WHOと日本肥満学会の肥満判定に基づき、DXA法(二重X線吸収法)によって作成しました。 ※小児の判定基準は日本肥満学会小児肥満症マニュアル作成委員会の肥満判定に基づき、 DXA基準の体脂肪率より作成しました。


© 2004 TANITA Corporation.

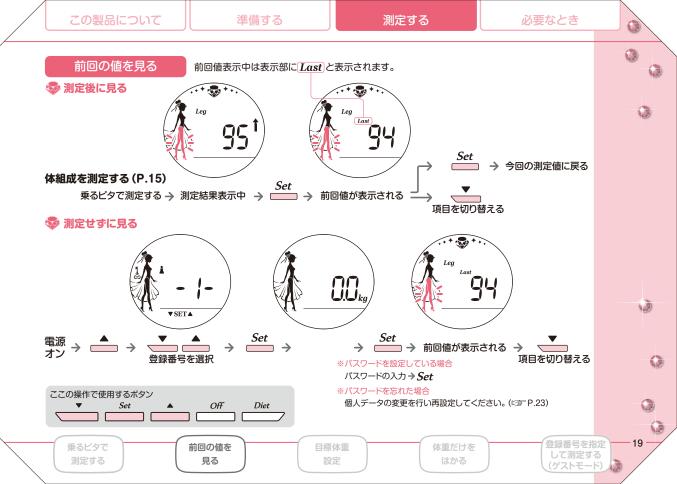

目標体重設定

※目標値は無理のない範囲で設定してください。



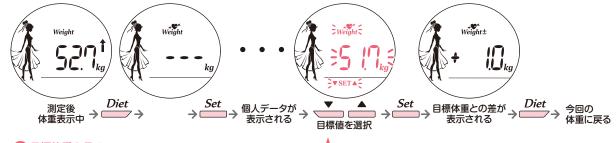




20 乗るピタで 測定する

前回の値を見る

目標体重設定

体重だけをはかる

🔯 目標体重を変更する・消去する

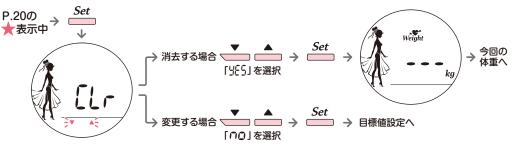

体重だけをはかる




 地域と日時を設定していない場合はA2(本州・四国・九州)で測定値を表示します。 ※地域と日時を設定する(で産 P.10)

乗るピタで 測定する 前回の値を 見る 目標体重設定

体重だけをはかる



登録番号を指定して測定する(ゲストモード)

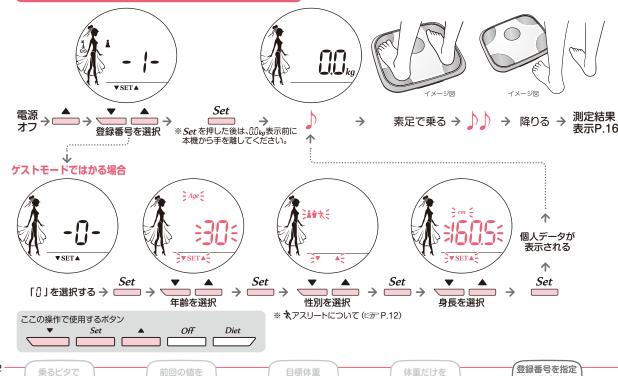


22 –

測定する


前回の値を見る


目標体重設定

体重だけを はかる

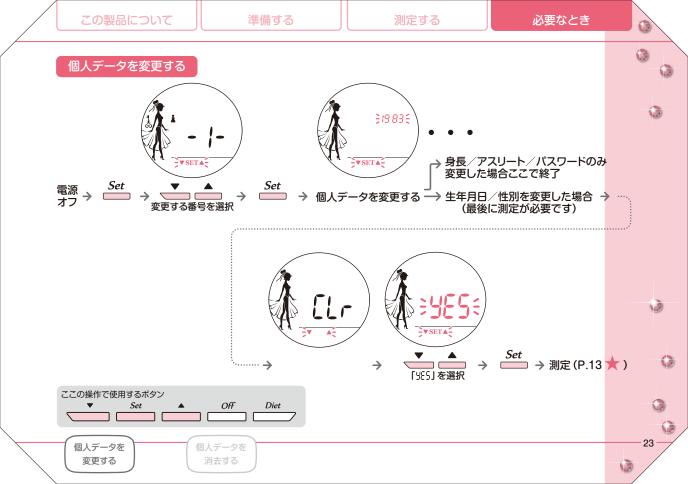

個人データを消去する

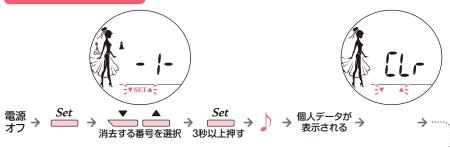

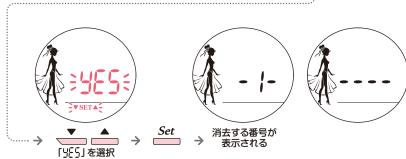



「故障かな?」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症 状	ご確認下さい	参照ページ	
どのボタンを押しても、何も表示されない	□電池がはずれていませんか? □電池が消耗していませんか?		
このボタフを押しても、何も表示されない	□電池の電極にビニールやゴミなどがついていませんか?		
「しの」が表示される	□電池の向きを確認し、正しく入れてください。□電池が消耗しています。速やかに交換してください。	10	
文字などが表示されたあと、すぐ表示が消える	□電池が消耗しています。速やかに交換してください。(電池の残量によっては「しの」を表示しない場合があります		
ボタンを押すと地域設定画面が表示される	□体組成をはかるには、地域と日時の設定が必要です。地域と日時を設定してください。		
本機に乗っても何も表示されない	□測定中に動いていませんか? □足の裏が汚れていませんか?		
測定中に「{」(エラー)が表示される	□靴下などを履いたまま測定していませんか?	8	
測定途中に、電源が切れる(表示が消える)	□測定中に降りていませんか?		
測定中に「 🔐 」が表示される	□最大計量(ひょう量)150kgを超えています。(この場合は測定不可)	26	
測定中に「-〇.〇 <i>kg</i> 」が表示される	口「角魚」「がままされる前に乗って」、ませんが2.必ず「角魚」「まま後に乗ってください	21	
測定中に「-①[」が表示される	\square 「 Ω $_{kg}$ 」が表示される前に乗っていませんか?必ず「 Ω $_{kg}$ 」表示後に乗ってください。		
测点级 化组成素二素	□個人データの設定内容が間違っていませんか?		
測定後、体組成表示で 「チーー」(エラー)が表示される	□他の人の登録番号を選択していませんか?		
1 [[[] (エンー)か扱かられる	□各測定項目が測定範囲を超えています。(この場合は測定不可)		
表示された体重が明らかに違っている	□硬く、平らな安定したところで測定してください。	6	
仕手にもまニナわかい	□個人データの設定を行いましたか?		
体重しか表示されない	□急激な体重増減がありましたか?その場合、一度、登録番号を指定して測定してください。		
測定後、数値がずっと点滅している	□体組成計に乗ったままではありませんか?降りてください。		
「[_] 」が表示される	□立てかけ収納等で生じた誤差を自動補正しています。		
「{{}と」が表示される	□自動補正のため測定後、降りてから約3秒間は、本機を動かしたり、ボタンを押さないでください。		
測定後、体脂肪率が5%と表示される	□5%以下の体脂肪率は、測定できません。(5%と表示されます)	26	
乗るピタで測定したら、違う人の登録番号が表示された	□体重や体の電気抵抗値が似た人が複数登録していると、誤認識する場合があります。	15	
体重、体脂肪率しか表示されない	□6~17才の方は、体重、体脂肪率以外は表示されません。	26	
美脚度が表示されない	□男性と6~17才の方は美脚度が表示されません。	26	
個人データを設定しても体組成を測定できない	□個人データの設定が完了していません。個人データを入力後、一度測定をする必要があります。	12	
「[[](クリア)と表示される	□個人データを変更または消去する際の確認の表示です。「 { 」(エラー)ではありません。	23~24	

型	πt.	BC-800			
	(ひょう量)	150kg			
	((日量)				
		0~100kg 迄 100g 単位	115		
	紡率	5.0%~75.0% 0.1% 単位	対象年齢 6~99才		
	率判定	1 (2) (3/47) (3/47) (4/47) (3/47)			
	脂肪率	2.8%~72.8% 0.1% 単位			
	防率判定	少ない/-標準/標準/+標準/多い	対象年齢		
基礎的	量態升	1kcal / 日単位	18~99才		
基礎代	射量判定	少ない/標準/多い	10 333		
体内	年齢	1 才単位			
美	脚度	50~100点	対象年齢		
美脚度判定		レベル 1~5 18~99才女性			
過去:	データ	前回値			
	地 域	3区分			
	日 時	2013年1月1日0:00~2050年12月31日23:59			
=0.0T=0	個人番号	1~4			
設定項目	生年月日	1900年1月1日~(6才以上)			
	性 別	女性/男性/女性アスリート/男性アスリート			
	身 長	90.0~220.0cm (0.5cm 単位)			
時計	精度	平均月差 ±1 分以内(常温)			
電 源 DC6V 単3 乾電池 (R6) ×4 本					
消費電流 最大 60mA		最大 60mA			
本体寸法 D211×W260×H32mm					
質	量	約 900g (乾電池含む)			

※100 才以上の方は参考値としてご覧ください。

■体重精度の保証範囲

●本機は、JIS (家庭用はかり)に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。 なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

仕 様

100kg まではかる場合	±200g
100kg をこえ 150kg まではかる場合	±400g

●ご家庭での測定が主な目的ですので、業務用(品物の 売買取引やその他の目方を証明する場合)にはお使い になれません。

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2、修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、 ご希望により有料修理させていただきます。
- 3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社

本社·東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎ 03 (3558) 8111 (代表) 大 阪 営 業 所 〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15 ☎ 06 (6784) 2811 (代表) 名 古屋 営 業 所 〒465-0072 名古屋市名東区牧野 4-2-6 ☎ 092 (575) 5761 (代表) 北 日 本 受 業 所 〒014-0113 秋田県大仙市坂県内学下田茂木添名-1 ☎ 0187 (66) 2144 (代表)

ホームページアドレス

http://www.tanita.co.jp



プリー 0120-13382

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2 タニタ サービスセンター 〒140-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添 28-1

経済省令適合マーク

© 2013 TANITA Corporation.

TANITA 保証書

販売店様へ

F、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日か ら下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理 をご依頼ください。お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。 ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入の この間、お客様の個人情報は第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任 を持って管理いたします。

				C142 CB404C00020	
品名	体組成計				
保証期間	本 体	お買い上げ日より 1年	Ē		
お買い上げ日		年	月	В	
	お名前				様
お客様	ご住所				
	電話	()		
25	住所·店名				
販売店	電話	()		

無料修理規定

- 1、取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料 修理をさせていただきます。
- 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡 の上、本機と保証書をお送りください。
- 3、ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室
- へご相談ください。
- 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 口、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷 二、一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載)に使用された場合の故障及び指傷 ホ、保証書の提示がない場合
 - へ、保証書にお買い上げ日の年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句 を書き替えられた場合
- 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保 証書によって、お客様の法律上の権利を 制限するものではありませんので、保証期間後の 修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

お客様サービス相談室 フリーダイヤル 00120-133821 受付時間/9:00~18:00 (土・日祝日は除く)